


うきうき♪
フロッシングライフ♪



フロスパイダー
商標登録出願中

使うのが楽しい
フロスで、
フロッシング習慣を
つけませんか？

★健康な歯と歯ぐきを保つ為、
虫歯の原因となるプラークは
毎日習慣的に除去する事が
望ましいと言われています。

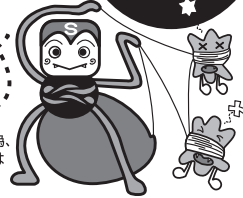

毎日楽しく
フロッシング

【注意事項】

- 歯科医師・歯科衛生士の指導のもとに、正しくご使用ください。
- 補綴物やむし歯への接触等によりフロスが滑らなったり、切れた繊維が歯間に残る恐れがあります。その際は歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。
- 本品は口腔内の清掃以外には使用しないでください。
- 本品は高温多湿の場所や直射日光を避けて保管してください。

【内容量】セット10m・スベア10m
【フロスの材質】ナイロン・ポリエステル

株式会社 アルピレオ


愛知県常滑市本郷町3丁目297
お客様窓口/0569-89-9494
受付時間/10:00a.m.~2:00p.m.
(土、日、祝祭日を除く)
アドレス/info@dentalplanning.net



フロスの
使用方法は



①約40cmのフロスを左右
の中指に巻きつけます。

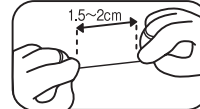

②親指と人差し指で1.5~
2cmの間隔でピンと張って
使います。



③小刻みはこのごきりを引く
ように動かし歯間を通過さ
せませす。



④歯の側面に沿わせてこす
りつけながら2~3回上下
させてください。

※別の歯間は新しいフロス部分をご使用ください。
※フロッシングの後は口をよくゆすいでください。

MADE IN CHINA